



In-Kone®

Інформаційний
лист

Розділ 1: Інструменти

Імплантоввід Ø4.2 мм із різьбовою фіксацією
ULTIMATE G42 - на платформі In-Kone® ST

Zi de Sacuny
118 Avenue Marcel Mérieux, 69530 BRIGNAIS, FRANCE
Tel : 04 78 56 97 00 – Fax : 04 78 56 01 63
www.globald.com

Цей документ призначений для стоматологів-хірургів.
У ньому описано характеристики та протоколи
використання імплантоввода для навігаційної хірургії G42
на платформі In-Kone® ST.

Імплантоввід G42 – Опис та показання до застосування

Імплантоввід Ø4.2 мм In-Kone® ST з різьбовою фіксацією (арт. DPIVIKST-G42) і є альтернативою імплантовводам G42 (арт. DCPICAIKST-G42 та DCPICAIKST-G42L) для встановлення імплантатів платформи In-Kone ST (діаметром 3,5 та 4 мм) під час навігаційної хірургії з використанням набору ULTIMATE G42. Вони застосовуються, зокрема, у складних випадках лікування повних зубних дуг, насамперед під час виконання протоколу OLYMP (див. документи: Протокол OLYMP – Навігаційна багатоетапна хірургія для негайного навантаження).

Цей імплантоввід складається з 2 частин: корпусу тримача імплантату та «невід'ємного» або «невідкручуваного» гвинта, що спрощує його використання в ротовій порожнині. Цей тип гвинта схожий на той, що використовується в трансферах для прямого зняття відбитку; імплантоввід так само як і трансфер виступає єдиною конструкцією разом з гвинтом, що полегшує його використання. Звичайно, цей гвинт повністю відкручується від корпусу компонента для проведення очищення та стерилізації.

Необхідні інструменти

Викрутка ручна шестигранна



DCM1.2 (C/ L)

Ключ динамометричний*



DCDYN-70D

Адаптер кутового наконечника



арт. 518-1000274

Додаткові інструменти

Распатор Молта

Екстрактор In-Kone®
платформа WD

DEMWD (Доступний у
стандартному, довгому та
екстрадовому розмірах)

Імплантоввід*



DPIVIKST-G42

«Інструменти платформи WD In-Kone® мають лазерне
маркування у вигляді чорного кільця та/або літер "WD"
для полегшення ідентифікації».

Встановлення імплантоввода на імплантаті

Встановіть Імплантоввід Ø4.2 мм In- Kone® ST з різьбовою фіксацією (арт. DPIVIST-G42) безпосередньо на імплантат, який знаходиться в своїй колбі перед введенням його у ротову порожнину пацієнта. Почніть з пригвинтування імплантоввода до імплантата вручну та завершіть процес використавши шестигранну викрутку DCM1.2 зі застосуванням зусилля 15 Н·см. Встановіть імплантат у ротовій порожнині з допомогою адаптера кутового наконечника (арт. 518-1000274) та динамометричного ключа. Не перевищуйте зусилля затягування понад 70 Н·см.





1. Встановіть імплантоввід на імплантат, щільно ввівши шестигранну викрутку у з'єднання імплантату. Затягніть гвинт імплантоввода за допомогою викрутки DCM1.2 та **застосуйте зусилля затягування 15 Н·см за допомогою динамометричного ключа.**



2. Встановіть імплантат за допомогою адаптера та динамометричного ключа. Надійно фіксуйте адаптер на шестиграннику імплантоввода, доки не почуєте чітке клацання. Не перевищуйте зусилля затягування понад 70 Н·см.

3. Впевніться, що ви зупинили введення імплантату одразу після досягнення імплантовводом країв втулки спрямування як показано на малюнку. Нанесене на імплантоввід та адаптер маркування дозволяє за потреби перевірити вестибулярність позиціонування шестигранного з'єднання.

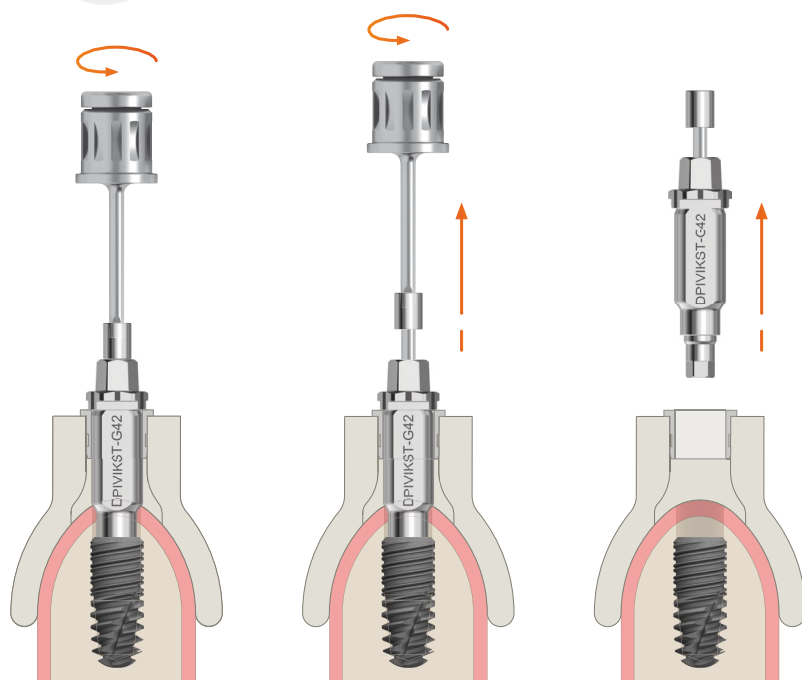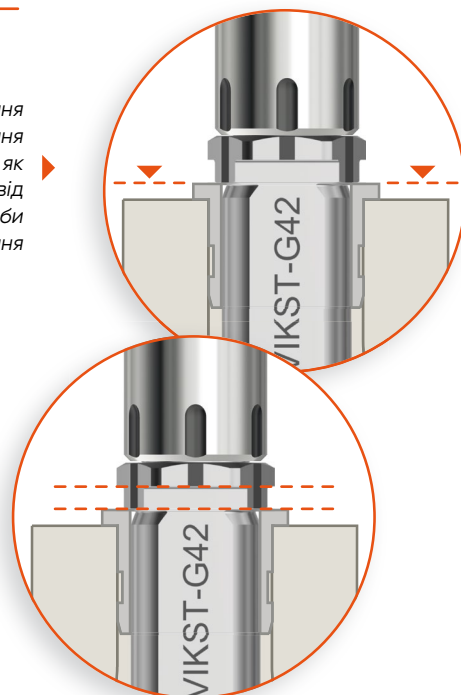

4. Послабте гвинт імплантоввода без його повного відкручування і вийміть інструмент з імплантата.

5. Додатково :

Існує кілька варіантів вилучення імплантоввода у випадку, якщо він застряг в імплантаті та/або у втулці:

- Распатор Молта також можна помістити у вільні пази, передбачені в обмежувачі імплантоввода, як показано на малюнку вище, для виконання легких рухів з метою усунення незначного заклинювання.
- Повністю вийміть гвинт з імплантоввода та використайте екстрактор абатментів WD.

*Динамометричний ключ DCDYN-2 є медичним виробом класу I, виготовленим компанією Josef Ganter Feinmechanik GmbH. Імплантоввід є медичним виробом класу I, виготовленим компанією Antea. Будь ласка, ознайомтеся з інструкціями з використання перед початком роботи.

Наші інструкції з використання надаються в електронному вигляді. Будь ласка, скористайтеся QR-кодом та URL-посиланням, вказаними на етикетці виробу. Проте друковані інструкції можуть бути надані за запитом і без додаткової оплати протягом 7 днів. Запит необхідно надіслати на таку адресу: quality@globald.com*